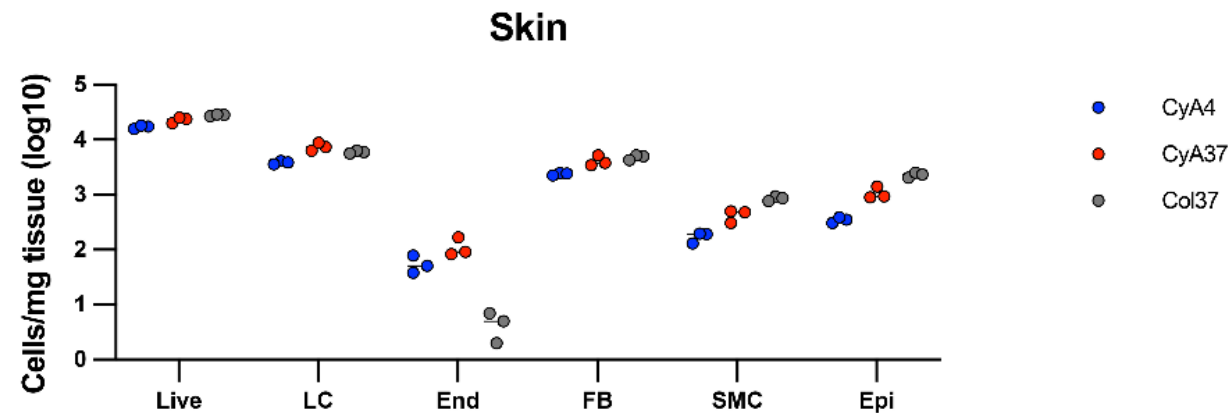
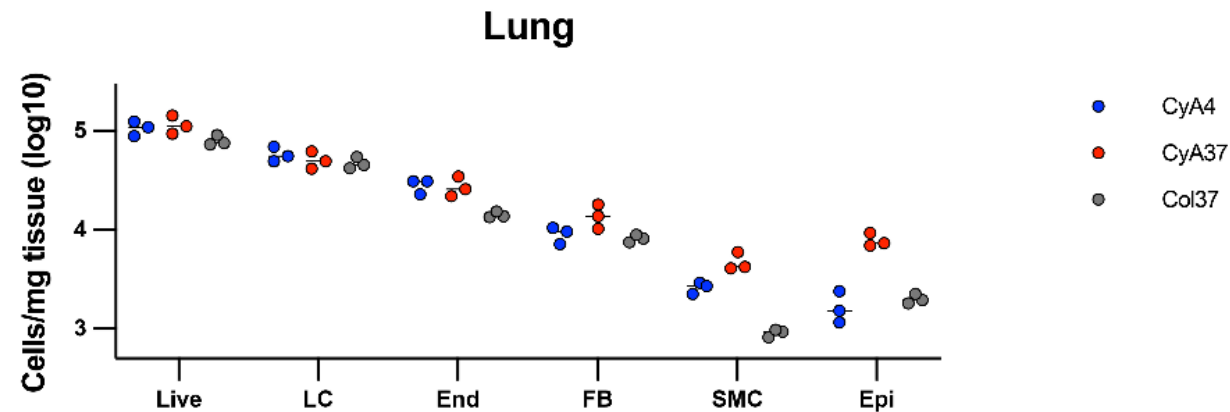




	Enzyme	ul/sample			
	Mix	Sol. 3	Sol. 5	Sol. 6	DMEM
肺・皮膚	A	1000	10	150	0

4°C 2hr or
37°C 40min

Col: Collagenase NB8 0.2% /Dispase 2.5U/mL/DNase 37°C1hr
*SkinはCol/Dis処理後、TrypLE 15min処理

LC: leukocytes
End: Endothelial cells
FB: Fibroblast
SMC: smooth muscle cells
Epi: Epithelial cells

※掲載している内容はあくまでご使用いただいたお客さまのサンプル・実験条件に基づくものであり、製品の品質を保証するものではないことをご了承ください。また、投稿いただいた内容のうち、実験手法に関する箇所は弊社推奨の使用方法を個別に検討・改善された結果を含んでいる場合があります。ご参考にされる場合は、お客さま各位の責任において実施していただきますようお願い申し上げます。